

Ulises Evo Pro™

SPECIÁLNÍ VOZÍK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ




POZOR

Výrobce nese odpovědnost za správnou funkci zařízení pouze v případě, že bylo zakoupeno u kvalifikovaného zaměstnance společnosti Akces-MED Sp. z o.o. nebo ve specializovaném zdravotnickém obchodě.

Společnost Akces-MED Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět technické a obchodní změny v obsahu návodu bez předchozího upozornění.

Zdravotnický prostředek třídy I v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.

Společnost Akces-MED Sp. z o.o. zavedla systém řízení kvality v souladu s normou ISO 13485 v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu.

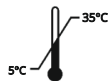

Obsah

Úvod.....	04
1. Účel tohoto návodu.....	05
2. Indikace a kontraindikace pro použití výrobku.....	05
3. Obecná konstrukce výrobku.....	07
4. Tabulka velikostí.....	08
5. Návod k použití výrobku.....	11
5.1 Rozbalení výrobku.....	11
5.2 Sestavení výrobku.....	12
5.3 Nastavitelné opěradlo.....	14
5.4 Prodloužení opěradla.....	16
5.5 Nastavitelné sedadlo.....	17
5.6 5bodové bezpečnostní pásy s nastavitelnou výškou upevnění.....	19
5.7 Opěrka hlavy.....	21
5.8 Nastavitelná opěrka nohou.....	22
5.9 Integrovaná centrální brzda.....	24
5.10 Držadlo pro vedení vozíku.....	25
6. Používání výrobku.....	26
6.1 Příprava uživatele.....	26
6.2 Nastupování a vystupování z výrobku.....	26
6.3 Zaujetí sedící polohy.....	28
6.4 Poloha při jízdě na speciálním invalidním vozíku.....	28
6.5 Jízda na speciálním invalidním vozíku.....	29
6.6 Návod k použití vest.....	30
7. Bezpečnostní pravidla.....	33
8. Záruční podmínky.....	35
9. Údržba a čištění.....	36
10. Značení.....	40

Úvod

ULISES EVO PRO™ je speciální vozík určený pro uživatele s pohybovým postižením. Vychází vstříc potřebám osob, které vyžadují dodatečnou stabilitu, a zároveň zajišťuje pohodlí a bezpečnost při každodenních činnostech.

Bezpečnost uživatelů je nesmírně důležitá, proto je vozík vybaven systémem polštářů a bezpečnostních pásů, stejně jako stabilní konstrukcí. Navíc reflexní prvky čalounění zvyšují viditelnost vozíku na silnici. Nastavitelné opěradlo umožňuje snadnou změnu úhlu jeho sklonu a systém nastavitelných popruhů přizpůsobuje opěradlo zakřivení páteře, čímž vyhovuje specifickým požadavkům uživatelů. Kromě toho byl u nastavitelných prvků výrobku, jako jsou opěradlo, sedák nebo opěrka nohou, použit systém plynulého a bezstupňového nastavení, díky čemuž lze tyto prvky nastavit v libovolném rozsahu.

Široký výběr příslušenství umožňuje přizpůsobit výrobek individuálním potřebám uživatelů, což z vozíku činí komplexní řešení pro osoby s individuálními požadavky.

Prosíme, pečlivě si přečtete tento návod. Obsahuje informace o výrobku a pokyny k jeho bezpečnému a efektivnímu používání.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás prosím kontaktujte:

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

Děkujeme za zakoupení produktu naší společností!

1. Účel tohoto návodu

POZOR

Před zahájením používání výrobku jsou uživatel i pečovatel povinni se seznámit s obsahem tohoto návodu a dodržovat pokyny v něm uvedené.

Mějte prosím na paměti, že dodržování pokynů uvedených v tomto návodu umožní bezpečné a správné používání výrobku a prodlouží jeho životnost i zachová jeho estetický vzhled.

Tento návod obsahuje základní informace nezbytné pro správnou přípravu vozíku před použitím, jeho používání, údržbu a čištění.

Návod je třeba uchovávat na snadno přístupném místě. Je určen pro osoby poskytující přímou péči osobám se zdravotním postižením a pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří s výrobkem pracují.

2. Indikace a kontraindikace pro použití výrobku

Zdravotnický prostředek určený pro osoby s ortopedickými, neurologickými a kardiologickými onemocněními a pro osoby po chirurgických zákrocích s výraznými poruchami pohybového aparátu, které si neosvojily schopnost samostatného sezení nebo mají značné potíže s zaujetím a udržením sedící polohy.

Je určen jak pro osoby s velkou ochablostí a sníženým svalovým tonusem, tak pro osoby trpící spasticitou. Výrobek může být také velmi užitečný u osob, které vyžadují dlouhodobé odlehčení jedné nebo obou dolních končetin. Výrobek představuje nenahraditelnou pomůcku v rehabilitačním procesu, a to jak z hlediska pohybu, tak i sociální integrace. Skvěle se osvědčuje při terapii a hře, ale i při dalších každodenních činnostech, jako je učení nebo přijímání stravy. Výběr vhodné velikosti výrobku závisí na lékařských indikacích a anatomických parametrech, a to bez ohledu na věk uživatele.

2. Indikace a kontraindikace pro použití výrobku

Tento výrobek je doporučen pro osoby, u nichž byla diagnostikována:

- dětská mozková obrna (DMO) – různé formy,
- meningomyelokéla,
- degenerativní a revmatická onemocnění kloubů,
- poškození mozku a míchy různé etiologie s parézou dolních končetin, parézou všech čtyř končetin, závažnými poruchami rovnováhy a koordinace pohybů,
- pokročilé demyelinizační nemoci (roztroušená skleróza – RS, amyotrofická laterální skleróza – ALS a další),
- svalová onemocnění provázená parézami a paralýzami (dystrofie, myastenien, polymyozitida),
- degenerativní a metabolická onemocnění nervového systému,
- po úrazech, po prodělaných úrazech lebky a mozku nebo úrazech páteře s poškozením míchy s parézami a paralýzami, zejména s parézami všech čtyř končetin (jako fáze rehabilitačního procesu nebo trvalá ortopedická pomůcka).

Kontraindikace:

- kritický stav pacienta,
- paralýza,
- hluboká sedace,
- nestabilní zlomeniny s konkrétními ortopedickými doporučeními, včetně zlomenin páteře,
- neléčená hluboká žilní trombóza,
- hemodynamická nestabilita,
- prokázané poruchy mozkové činnosti při sezení ve vzpřímené poloze,
- těžký zánět kloubů krční páteře,
- plicní embolie,
- čerstvý infarkt myokardu v posledních 24 hodinách,
- čerstvé pooperační rány nebo nehojící se rány v oblasti zad, pánevního okruhu, kyčelních kloubů a stehen,
- uživatelé s duševními poruchami by neměli být ponecháni v pomůcce bez dohledu pečovatele.

3. Obecná konstrukce výrobku

STANDARDNÍ VYBAVENÍ





- PRODLOUŽENÍ OPĚRKY
- PLNĚ NASTAVITELNÁ OPĚRKA HLAVY
- DRŽÁK PRO VEDENÍ KOČÁRKU
- KRYTY SKLÁPĚČÍHO MECHANISMU KOČÁRKU
- OPĚRKA S NASTAVITELNÝM ÚHELEM SKLONU
- 5-BODOVÉ PÁSY S NASTAVITELNOU VÝŠKOU UPEVNĚNÍ
- SYSTÉM BOČNÍ STABILIZACE
- SKLÁDACÍ RÁM
- SEDÁK S PĚLYNULÝM A BEZSTUPŇOVÝM NASTAVENÍM HLOUBKY
- OPĚRKA NOHOU S PĚLYNULÝM A PŘESNÝM NASTAVENÍM DÉLKY A ÚHLU SKLONU S 4-BODOVÝMI POPRUHY PRO STABILIZACI NOHOU
- INTEGROVANÁ PARKOVACÍ BRZDA ZADNÍCH KOL S NASTAVITELNOU TLAKOVOU SÍLOU
- ZADNÍ KOLA PLNÁ
- PŘEDNÍ KOLA PLNÁ, OTOČNÁ



INFORMACE

Navštivte záložku produktu na webových stránkách akces-med.com, kde si můžete prohlédnout dostupné příslušenství.

4. Tabulka velikostí

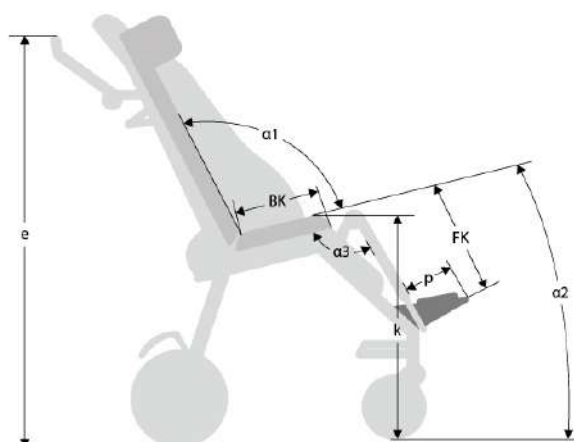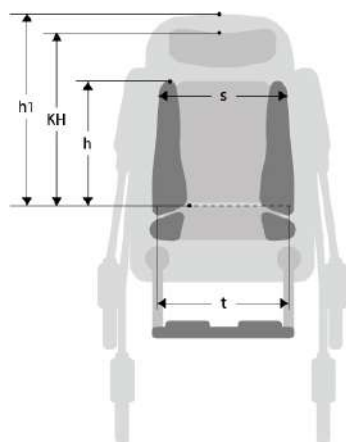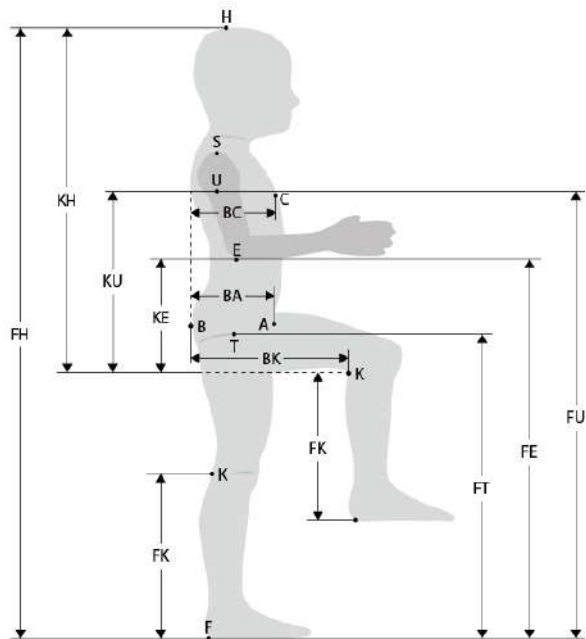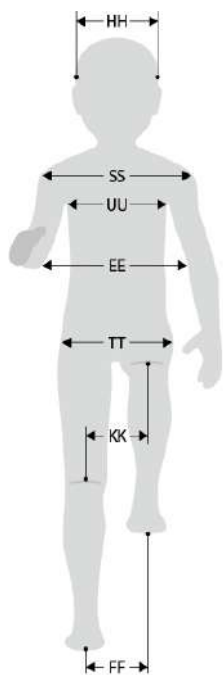

4. Tabulka velikostí

Symbol • Měření • Jednotka • Rozměr

			1	1a	2	2a	3
FH	přibližný nárůst počtu uživatelů	[cm]	80 - 120	100 - 150	100 - 150	130 - 180	130 - 180
t	šířka sedáku bez boční opory	[cm]	31	31	37	37	43
t1	šířka sedáku s bočními stabilizačními výplněmi	[cm]	25	25	27	27	33
t2	šířka sedáku ve výšce kolen	[cm]	26	26	32	32	38
BK	hloubka sedáku	[cm]	21 - 30	29 - 37	29 - 37	35- 45	35 -45
s	šířka opěradla bez boční opory	[cm]	28	28	34	34	40
s1	šířka opěradla s bočními stabilizačními vložkami	[cm]	25	25	28	28	34
s2	šířka opěradla s vložkami a pěnovými výplněmi pro boční stabilizaci**	[cm]	17	17	22	22	26
h	výška opěradla bez prodloužení opěradla	[cm]	52	59	59	66	66
h1	výška opěradla s prodloužením opěradla	[cm]	63 - 68	70 - 75	70 - 75	77 - 82	78 - 83
KH	výška opěrky hlavy	[cm]	38 - 63	40 - 71	40 - 71	47 - 78	48 -79
FK	vzdálenost opěrky nohou od sedadla	[cm]	19 - 27	23 - 35	23 - 35	26 - 41	26 - 41
p	délka plošiny opěrky nohou	[cm]	17	17	19	19	22
e	výška vodících úchytů	[cm]	78 - 120	75 - 124	75 - 124	75 - 124	75 - 124
k	výška sedáku*	[cm]	52 - 54	54 - 56	54 - 56	59 - 61	59 - 61
α1	úhel sklonu opěradla	[°]	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150
α2	úhel sklonu sedadla	[°]	14	14	14	14	14
α3	úhel sklonu opěrky nohou	[°]	90 - 162	90 - 162	90 - 162	90 - 162	90 - 162
-	max. hmotnost uživatele	[kg]	55	55	75	75	75

* Výška sedáku závisí na jeho hloubce.
** Měření se týká spodní části opěradla.

Rozměry a hmotnost zařízení • Jednotka • Velikost

		1	1a	2	2a	3
	šířka***	[cm]	58	58	64	70
	šířka ve složeném stavu***	[cm]	58	58	64	70
	délka	[cm]	80 - 134	82 - 155	85 - 155	96 - 178
	délka ve složeném stavu	[cm]	98	104	104	116
	výška	[cm]	100 - 120	101 - 124	101 - 124	104 - 131
	výška ve složeném stavu	[cm]	41	43	45	46
	hmotnost	[kg]	20	20,5	21	24

*** U vozíku s bubnovou brzdou se šířka zvětšuje o 3 cm.

4. Tabulka velikostí

Symbol • Doplnčková měření • Jednotka • Velikost

			1	1a	2	2a	3
KE	výška loketních opěrek od sedáku	[cm]	21 -33	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36
-	délka loketní opěrky	[cm]	26	26	26	26	26
-	šířka podpaží	[cm]	5	5	5	5	5
EE	vzdálenost mezi loketními opěrkami	[cm]	25	25	31	31	37
KU	výška „krátké“ hrudní peloty	[cm]	22 - 35	22 - 38	22 - 38	22 - 38	22 - 38
	výška „dlouhé“ hrudní peloty	[cm]	22 - 35	22 - 38	22 - 38	22 - 38	22 - 38
	výška „široké“ hrudní peloty	[cm]	26 - 39	26 - 42	26 - 42	26 - 42	26 - 42
UU	šířka mezi hrudními polštáři	[cm]	9 - 19	15 - 25	15 - 25	21 - 31	21- 31

„Dlouhá“ prsní pelota, rozměry: délka 22 cm, výška 11 cm (výška plechu 7 cm).
„Krátká“ hrudní pelota, rozměry: délka 18 cm, výška 11 cm (výška plechu 7 cm).
„Široká“ prsní pelota, rozměry: délka 16 cm, výška 20 cm (výška plechu 15 cm).
Pozor: Loketní opěrka a hrudní polštář se montují na stejnou lištu pro nastavení výšky.
Používání obou doplňků současně omezuje uvedený rozsah nastavení výšky těchto doplňků.

5. Návod k použití výrobku

5.1 Rozbalení výrobku

INFORMACE

Před rozložením vozíku je třeba nezapomenout uvolnit pojistku, která brání jeho rozložení.



USLYŠÍTE CHARAKTERISTICKÉ KLIKNUTÍ



POZOR

Při rozkládání kočárku uslyšíte charakteristické „KLIK“ – to znamená, že se na sebe nasadily součásti skládacího mechanismu kočárku.

Při rozkládání výrobku se ujistěte, že se mezi rozkládanými částmi nenacházejí žádné části čalounění.






Před zahájením používání výrobku se ujistěte, že byl správně rozložen a že je opěradlo zajištěno ve zvolené poloze.

5. Návod k použití výrobku

5.1 Rozbalení výrobku

i INFORMACE






Výrobek je vybaven kapsami v čalounění opěradla a sedáku – po rozložení je třeba do nich vložit stabilizační polštářky pro uživatele.

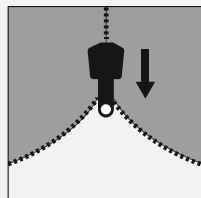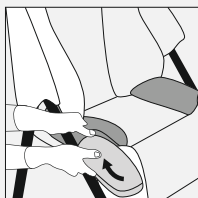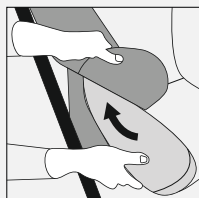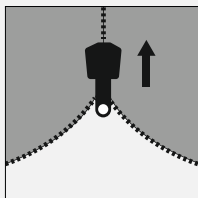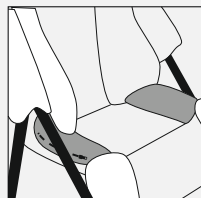

5.2 Sestavení výrobku

i INFORMACE

Před složením výrobku je třeba z kapes čalounění opěradla a sedáku vyjmout stabilizační polštářky.

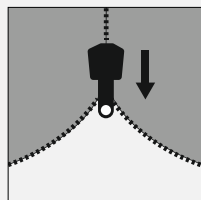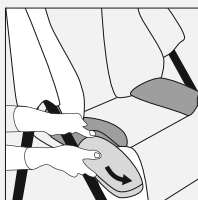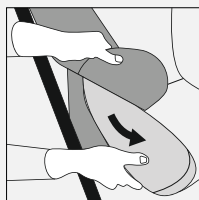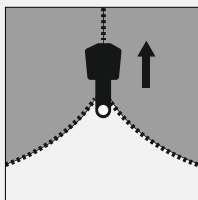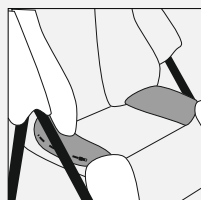

5. Návod k použití výrobku

5.2 Sestavení výrobku



5. Návod k použití výrobku

5.3 Nastavitelné opěradlo



POZOR

Může dojít ke kolizi opěradla s madlem. V takovém případě je třeba madlo zvednout co nejvýše (pomocí nastavovacích prvků), seřadit opěradlo a poté nastavit madlo do požadované polohy.

Před zahájením používání vozíku se ujistěte, zda jsou kovové čepy zasunuty do otvorů na obou stranách ve stejné výšce a zda je opěradlo zajištěno.

Zatažení za popruh bez předchozího posunutí opěradla dopředu může způsobit poškození mechanismu nastavení úhlu opěradla. To platí zejména v situacích, kdy je v vozíku uživatel a svou vahou tlačí na opěradlo.



PRÁVIDLA PRO NASTAVENÍ OPĚRKY **BACKREST ADJUSTMENT**


**MÍRNĚ ZATLAČTE
NA OPĚRKU A PODRŽTE JI**
**PUSH THE BACKREST SLIGHTLY
AND HOLD**




ZATÁHNĚTE ZA PÁSKU
PULL THE STRAP



NASTAVTE ÚHEL OPĚRKY
ADJUST THE BACKREST ANGLE

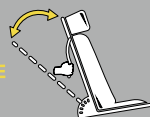

**UVOLNĚTE POPRUH A POMALU
SKLÁPĚJTE OPĚRADLO,
DOKUD SE NEZABLOKUJE**
**RELEASE THE BELT AND
SLOWLY LOWER THE BACKREST
UNTIL IT LOCKS**

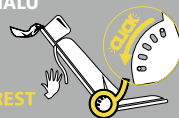

POZOR! Než začnete nastavovat úhel sklonu opěradla, přečtěte si návod k použití.
ATTENTION! Read the user manual before adjusting the backrest

Obr. 1 Informační štítek na zadní straně výrobku

5. Návod k použití výrobku


5.3 Nastavitelné opěradlo

INFORMACE


Opěradlo vozíku není celoplošně tuhé.

Za opěradlem se nacházejí popruhy, které lze nastavit tak, aby se opěradlo přizpůsobilo potřebám uživatele.

Umožňují také přizpůsobení opěradla zakřivení páteře.

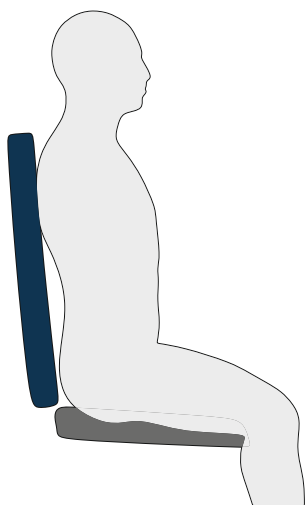

Obr. 2 Schéma standardní opěrky vozíku

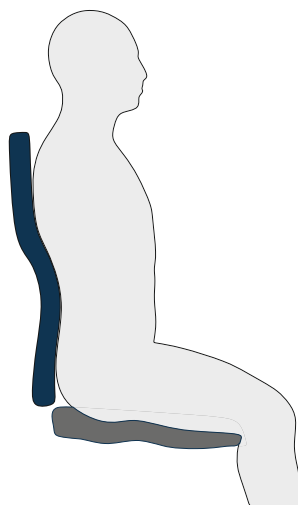

Obr. 3 Schéma opěradla vozíku Ulises Evo Pro™

POZOR

Je třeba dbát na to, aby se lepicí pásy za opěradlem překrývaly minimálně o 8 cm.

Před zahájením používání je třeba zkontrolovat, zda je každá z nich správně přilepena a zda prochází průchodkou. Nesmí se stát, aby některá z nich zůstala volně nepřilepená.

5. Návod k použití výrobku

5.4 Prodloužení opěradla






INFORMACE

Uchopte prodloužení opěradla z obou stran a vysuňte jej nahoru do požadované výšky. Tím dojde k posunutí prvku pro nastavení výšky prodloužení opěradla. Tento prvek je třeba spustit až na doraz, čímž se prodloužení opěradla zafixuje v požadované výšce.

Navíc lze prodloužení opěradla nastavit:

- do neutrální polohy,
- dosklonu/odklonu,
- pod úhlem.

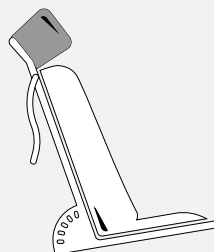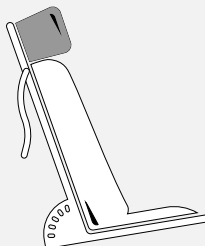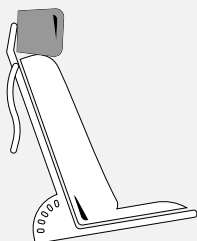


5. Návod k použití výrobku


5.5 Nastavitelné sedadlo

INFORMACE

Sedák kočárku není pevně nastavený – lze jej přizpůsobit potřebám uživatele pomocí nastavitelných popruhů, které se nacházejí pod sedákem.

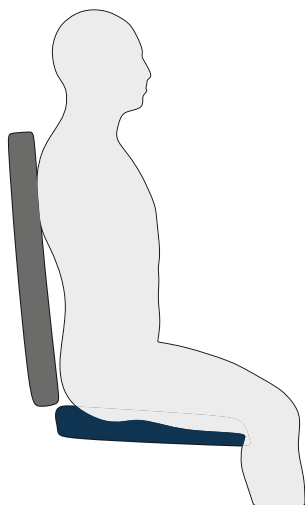

Obr. 4 Schéma standardního sedadla vozíku

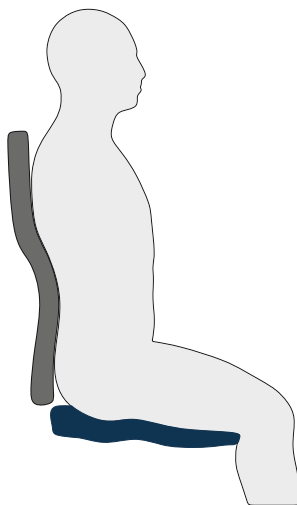

Obr. 5 Schéma sedadla vozíku Ulises Evo Pro™

POZOR

Je třeba dbát na to, aby se lepicí pásy za opěradlem překrývaly minimálně o 8 cm.

Před zahájením používání je třeba zkontrolovat, zda je každá z nich správně přilepena a zda prochází průchodkou. Nesmí se stát, aby některá z nich zůstala volně nepřilepená.

5. Návod k použití výrobku

5.5 Nastavitelné sedadlo

NASTAVENÍ HLOUBKY SEDÁKU



i INFORMACE

Při nastavování hloubky sedadla je třeba nezapomenout na rozepnutí čalounění sedadla.

Maximální vysunutí sedadla je signalizováno aretačním mechanismem, který se aktivuje v otvorech po stranách konstrukce sedadla.

Chcete-li zmenšit hloubku sedadla, stiskněte aretační mechanismus a proveďte nastavení.

5. Návod k použití výrobku

5.6 5bodové bezpečnostní pásy s nastavitelnou výškou upevnění



5. Návod k použití výrobku

5.6 5bodové bezpečnostní pásy s nastavitelnou výškou upevnění



INFORMACE

Pásy je třeba utáhnout pod sedadlem výrobku.

Před nasazením matice nezapomeňte nasadit podložku.




POZOR

Před zahájením používání výrobku je bezpodmínečně nutné se seznámit s bezpečnostními pokyny týkajícími se používání bezpečnostních pásů a vest – viz Návod k použití vest. Nesprávné používání a nedodržování bezpečnostních pokynů může ohrozit zdraví a život uživatele.

Před každým použitím 5bodových bezpečnostních pásů je třeba zkontrolovat, zda jsou pásy správně namontovány a zda se spona nerozepne pod tlakem vyvíjeným uživatelem.

5. Návod k použití výrobku

5.7 Opěrka hlavy

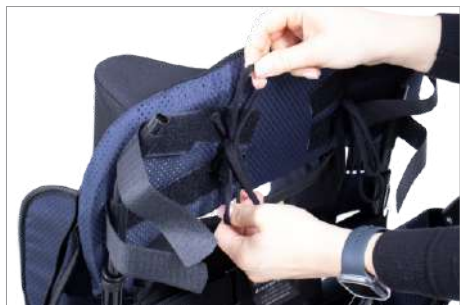

5. Návod k použití výrobku

5.8 Nastavitelná opěrka nohou

NASTAVENÍ DÉLKY OPĚRKY NOHOU



i INFORMACE

Nezapomeňte, že po dokončení nastavení délky opěrky nohou je třeba utáhnout knoflíky na obou stranách.



NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU OPĚRKY NOHOU



5. Návod k použití výrobku

5.8 Nastavitelná opěrka nohou

NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU OPĚRKY NOHOU



NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU DESKY OPĚRKY NOHOU




INFORMACE

Na vnitřní straně podnožky se na obou stranách nacházejí šrouby, které je třeba povolit.

Pod dokončení nastavení nezapomeňte tyto šrouby opět utáhnout.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

imbusový klíč 3

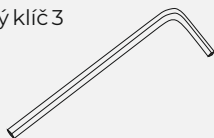

5. Návod k použití výrobku

5.9 Integrovaná centrální brzda



i INFORMACE


Brzda se aktivuje po silném stlačení její páčky.

i INFORMACE




Brzda umožňuje nastavení síly brzdného tlaku.

Utahováním nebo povolením matic umístěných na obou stranách brzdy lze měnit sílu brzdného tlaku.

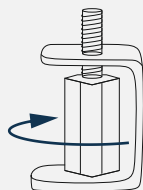

UTAHOVÁNÍ VE SMĚRU RUČÍČEK HODIN – ZVÝŠENÍ TLAKOVÉ SÍLY
BRZDY

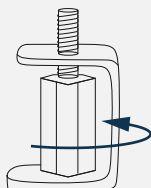

OTÁČENÍ PROTI SMĚRU RUČÍČEK HODIN – SNÍŽENÍ BRZDÍCÍ SÍLY

5. Návod k použití výrobku

5.10 Držadlo pro vedení vozíku



POZOR

Nastavení výšky rukojeti se nachází na obou jejích stranách.

Před zahájením používání výrobku se ujistěte, že jsou správně zajištěny – utáhněte svorky a zkontrolujte, zda se výška nemění při působení síly na rukojeť.

6. Používání výrobku

6.1 Příprava uživatele

Před zahájením používání výrobku je třeba zajistit, aby:

- oblečení uživatele bylo lehké a neomezovalo pohyb,
- obuv byla pohodlná a dobře stabilizovala hlezenní klouby,
- uživatel nebyl z hygienických důvodů a za účelem zabránění odřeninám umístěn do zařízení bez oděvu zakrývajícího tělo v místech kontaktu s čalouněním,
- v případě použití jakýchkoli doplňkových pomůcek, jako jsou venflony, drény, vaky, katetry atd., byly tyto pomůcky náležitě zajištěny proti vypadnutí, vytržení nebo přiskřípnutí tak, aby při používání výrobku nepřekážely,
- nasadit ortopedické pomůcky (krční límec, korzet, ortézy, ortopedická obuv atd.), pokud je jejich použití indikováno.

POZOR

Oblečení musí chránit pokožku uživatele před přímým kontaktem s čalouněním a dalšími částmi přístroje, aby se zabránilo odřeninám.

O použití konkrétních ortopedických pomůcek rozhoduje ošetřující lékař nebo fyzioterapeut.

6.2 Nastupování a vystupování z výrobku

Umístění uživatele do výrobku:

- umístěte výrobek na rovnou plochu bez sklonu tak, aby byl k výrobku snadný přístup,
- ujistěte se, že všechny části jsou funkční, řádně upevněné a stabilní,
- zablokujte brzdu,
- přizpůsobte výrobek rozměrům uživatele,
- odepněte 5bodové pásy nebo vestu, pásy či jiné vybavení, aby bylo možné uživatele volně usadit,
- nestoupejte na podnožku,
- usadte uživatele do výrobku (obr. 1),
- zapněte prvky sloužící ke stabilizaci uživatele,


6. Používání výrobku

6.2 Nastupování a vystupování z výrobku

- umístit prvky, které uživatele podepírají a udržují v požadované poloze,
- namontovat zbývající vybavení.

Vyjmutí uživatele z výrobku:

- umístíte výrobek na rovnou plochu bez sklonu tak, aby byl k výrobku snadný přístup,
- zablokujete brzdu,
- odepnete pětibodové bezpečnostní pásy nebo vestu, pásy či jiné vybavení, aby bylo možné uživatele volně umístit,
- nestupujete na podnožku,
- vytáhněte uživatele z výrobku (obr. 1).

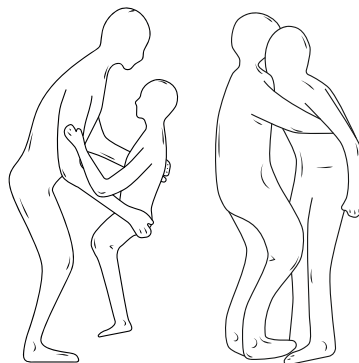

Obr. 1 Způsoby podpory uživatele

⚠ POZOR

Před zahájením používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny pásy, vesty a bezpečnostní prvky správně nastaveny a zapnuty a že jsou upevňovací prvky nastavitelných částí pevně utaženy.

Je zakázáno stoupat na desku opěrky nohou při nastupování uživatele do výrobku. V extrémních situacích může dojít k poškození opěrky nohou nebo k převrácení a poškození výrobku, což může mít za následek zranění uživatele.

Výrobek bude správně plnit svou funkci pouze tehdy, bude-li přizpůsoben tělesným rozměrům uživatele.

Hlavním pravidlem při přizpůsobování výrobku je zajistit uživateli maximální pocit bezpečí. Nesmí se vynucovat změna polohy těla uživatele – mohlo by to způsobit jeho nepohodlí.

U uživatelů s únikem moči (inkontinencí) je třeba použít hygienické podložky. Lze je zakoupit v lékárnách nebo v obchodech se zdravotnickými potřebami.

Nesprávné používání výrobku může vést k upevnění nesprávných vzorců držení těla.

6. Používání výrobku

6.3 Zaujetí sedící polohy

K prvnímu usednutí uživatele do sedu obvykle dochází v rehabilitačních, neurologických, neurochirurgických nebo ortopedických zařízeních. Je důležité správně přizpůsobit jednotlivé součásti výrobku postavě uživatele s ohledem na stávající kontraktury a deformity.

Usazení v domácím prostředí provádí kvalifikovaný personál po předchozím proškolení (fyzioterapeut, domácí zdravotní sestra, proškolené osoby z rodiny) po předchozím seznámení s návodem k použití výrobku.

POZOR

Nesprávné nastavení výrobku může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, deformace těla nebo přetížení kloubů. V případě jejich výskytu je třeba okamžitě přerušit používání, uživatele z výrobku vyjmout a uložit do lehu. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, je třeba neprodleně kontaktovat lékaře. Pokud příznaky ustoupily, je třeba o tom informovat ošetřujícího lékaře, aby mohl rozhodnout o dalším průběhu rehabilitace.

Rozhodnutí o použití výrobku přijímá ošetřující lékař.

Nastavení výrobku pro uživatele by měly provádět výhradně osoby, které prošly příslušným školením v oblasti obsluhy výrobku a seznámily se s návodem k použití.

6.4 Poloha při jízdě na speciálním invalidním vozíku

Pro zajištění bezpečnosti a zdraví uživatele je třeba umístit pánev a záda co nejblíže k opěradlu, aby byla páteř rovnoměrně podepřena. Stehna by měla být podepřena po celé délce, což vyžaduje nastavení hloubky sedáku pomocí dostupných regulací, a pokud tyto nejsou k dispozici, pomocí dostupného příslušenství.

Nohy by měly být opřeny o desku opěrky nohou, aby se zabránilo sklouzávání, zajistilo optimální napětí svalů a přeneslo tělesnou hmotnost.

Vzhledem k dostupným nastavením výrobku je zakázáno nastavovat polohu, ve které se hlava uživatele nachází pod úroveň pánve. Tato poloha představuje riziko vdechnutí tekutin nebo udušení.

6. Používání výrobku

6.5 Jízda na speciálním invalidním vozíku

Při používání vozíku jej vždy držte za rukojeť, abyste zabránili jeho samovolnému pohybu.

Před rozjezdem uvolněte centrální brzdu a držte rukojeť, čímž nasměrujete vozík bezpečným směrem.


Pohyb po šikmých plochách

Při překonávání stoupání vždy nasměrujte vozík čelem ke směru jízdy. Snižte rychlost a pohybujte se pomalu. Ošetřovatel musí mít dostatečnou sílu, aby udržel stabilitu vozíku.

Mějte na paměti, že na nerovnostech se mění těžiště vozíku. Ujistěte se, že nájezd je vhodný a kola dostatečně vysoká, aby se rám nedotýkal nájezdu. Je vhodné zajistit si pomoc druhé osoby.

Překonávání prahů a obrubníků

Chcete-li překonat malé překážky, stiskněte rukojeť dolů, aby se přední kola vozíku zvedla, a poté s nimi přejedte přes překážku. Vytáhněte rukojeť nahoru a zvedněte zadní kola tak, abyste s nimi přejedte přes překážku.

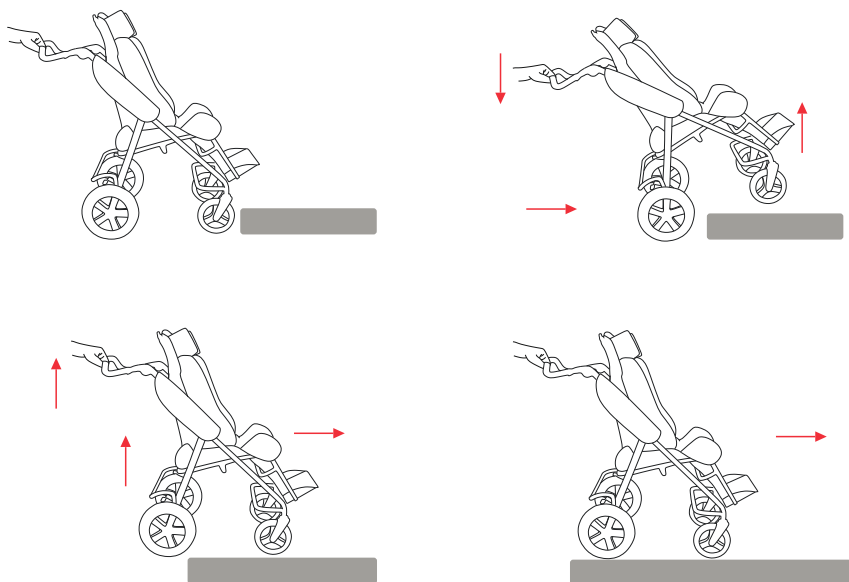

Obr. 2 Schéma překonávání prahů a obrubníků

6. Používání výrobku

6.6 Návod k použití vest

POZOR

Vesta zajišťuje podporu držení těla u osob sedících na speciálních invalidních vozících, v sedadlech nebo na jiných rehabilitačních sedadlech. Při správném používání umožňuje hrudní vesta udržet správnou polohu při sezení po delší dobu. Díky své konstrukci vesta neomezuje volný pohyb horních končetin.

Pokud není vesta používána správně, může představovat vážné ohrožení zdraví a života uživatele.

Možná rizika spojená s používáním vesty.

1. Pokud jsou spodní popruhy vesty zapnuté příliš volně, hrozí, že se vesta posune až k krku uživatele a ztíží mu dýchání – vždy je třeba zkontrolovat napnutí popruhů a nastavit je tak, aby spodní okraj vesty byl umístěn přibližně v oblasti podbřišku uživatele.
2. Uživatel sklouzne ze sedadla, horní okraj vesty mu obepne krk a zablokuje průdušnici, čímž mu ztíží dýchání – při používání vesty je VŽDY nutné používat doplňkové vybavení, jako je např. bederní pás, aby se zabránilo sklouznutí z výrobku.
3. Existuje riziko, že horní popruhy upevňující vestu budou uživateli tlačít na krk a ztěžovat dýchání v případě, že byl uživatel v výrobku nesprávně zajištěn – v takovém případě je třeba trup uživatele dodatečně zafixovat pomocí bočních polštářků. Pokud zařízení takové boční polštářky nemá a nelze trup správně zafixovat, je třeba jej vyměnit za zařízení, které tuto funkci má.
4. Vesta je příliš těsně utažená k opěradlu, což uživateli brání ve volném dýchání – v takovém případě je třeba povolit popruhy upevňující vestu tak, aby pečovatel mohl volně vsunout ruku mezi vestu a tělo uživatele. Pokud však záleží na správné stabilizaci uživatele, měli bychom použít dynamickou ortopedickou vestu, např. vestu Flex-Point®, která uživateli nebrání v dýchání.

Návod k správnému používání vesty:

1. Ujistěte se, že uživatel sedí v co nejvhodnější poloze:
 - uprostřed sedadla,
 - hluboko do sedadla tak, aby křížová část páteře přiléhala k opěradlu.
2. Zajistěte pánev uživatele.
3. Ujistěte se, že boční opěrky zařízení, pokud se používají, jsou umístěny na správných místech. Používání bočních opěrek se důrazně doporučuje uživatelům se slabou kontrolou trupu. Tyto opěrky omezují pohyby trupu směrem do strany, které by mohly vést k tlaku popruhů vesty na krk.

6. Používání výrobku

6.6 Návod k použití vest

4. Nasadte si vestu a upravte ji:
 - zapněte a nastavte spodní popruhy vesty tak, aby spodní okraj vesty byl umístěn přibližně v oblasti podbřišku uživatele; spodní popruhy vesty nesmí být příliš volné,
 - zapněte vodorovný pásek vesty (pokud je k dispozici),
 - zapněte ramenní popruhy vesty,
 - zkontrolujte, zda se spony vesty pod tlakem nerozepnou.
5. Zkontrolujte polohu uživatele:
 - ujistěte se, že se vesta nemůže sama posunout k krku uživatele,
 - ujistěte se, že můžete vsunout ruku mezi tělo uživatele a vestu.

Aby se předešlo úrazům a co nejvíce se snížilo riziko spojené s používáním vesty, je třeba dodržovat následující pravidla.

1. Poloha vesty MUSÍ být bezpodmínečně pokaždé zkontrolována poté, co se uživatel posadí na sedadlo.
2. Je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění uživatele proti pádu dopředu, sklouznutí ze sedadla nebo zvednutí pánve. Vesta MUSÍ být používána po celou dobu spolu se zajištěním pánve uživatele (např. pomocí bederního pásu). Použití vesty nelze posuzovat samostatně, ale jako součást celkového systému podpory držení těla spolu s dalšími podpěrami, jako jsou bederní pásy, opěrky nohou, stabilizace trupu, poloha v křesle typu „kbelík“ a sklopné opěradlo.
3. Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby obě chodidla uživatele měla stabilní oporu. Pokud výrobek není vybaven opěrkou pro chodidla, musí se chodidla uživatele pevně opírat o podložku.
4. Je třeba mít na paměti, že každá změna úhlu sklonu opěradla, sedáku, opěrky nohou či nastavení tvarované sedačky může ovlivnit účinnost bezpečnostních pásů a opěr.
5. Zvláštní pozornost je třeba věnovat použití prvků stabilizujících trup nebo bočních opěrek. Pokud má uživatel slabou kontrolu nad trupem, tyto opěrky omezí boční pohyby, které by mohly vést k tomu, že popruhy vesty budou tlačit na krk uživatele.
6. Montáž a přizpůsobení vesty uživateli smí provádět pouze osoba, která prošla příslušným školením a je seznámena s návodem k použití vesty a zásadami jejího bezpečného používání.
7. Na vestě neprovádějte žádné opravy ani úpravy sami! Chcete-li vestu opravit nebo na ni něco změnit, obraťte se na jejího výrobce.
8. Poškozenou, opotřebovanou nebo neúplnou vestu nepoužívejte, protože to představuje ohrožení života a zdraví uživatele.
9. Uživatele nesmí být v tomto výrobku ponechán bez dozoru.

6. Používání výrobku

6.6 Návod k použití vest

10. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému používání vesty v souladu s pokyny u dětí, osob s poruchami paměti nebo duševně nemocných.
11. Je třeba se ujistit, že všechny osoby, které o uživatele pečují, jsou seznámeny s pravidly jejího bezpečného používání.

Vesta funguje účinně, pokud je udržována v čistotě a udržována v souladu s pokyny výrobce. Před každým použitím vesty je třeba zkontrolovat, zda:

- popruhy vesty nejsou roztřepené ani opotřebované – pokud ano, je třeba je nechat vyměnit za nové,
- popruhy vesty nejsou připevněny k kolečkům výrobku,
- spony nejsou poškozené – pokud ano, je třeba nechat je vyměnit za nové,
- spony na suchý zip drží pevně – pokud ne, je třeba z nich odstranit veškeré nečistoty nebo nechat je vyměnit za nové,
- od okamžiku přizpůsobení vesty uživateli nedošlo k žádným změnám v důsledku jeho výšky, přibývání na váze nebo hubnutí,
- jsou popruhy vesty správně nastavené, nejsou příliš volné ani příliš těsné,
- vesta je čistá – je třeba ji pravidelně čistit teplou mýdlovou vodou a sušit mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla. Před dalším použitím musí být vesta vždy suchá.

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání vesty, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta.

7. Bezpečnostní pravidla

POZOR

Speciální invalidní vozík ULISES EVO PRO™ je třeba používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Před každým použitím je třeba připravit uživatele i zařízení.

Před rozhodnutím o koupi výrobku je třeba se poradit s odborným lékařem nebo fyzioterapeutem ohledně jeho správného výběru. Před použitím výrobku je třeba se seznámit se všemi pokyny v přiloženém návodu.

1. Před každým použitím výrobku je třeba:

- zkontrolovat výrobek, zda nevykazuje viditelné poškození nebo jiné vady, které by mohly ohrozit uživatele při používání výrobku,
- ujistit se, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zda výrobek nevykazuje známky prasklin a deformací,
- zkontrolovat, zda se neuvolnily šrouby, matice a další závitové, lepené, šité atd. spoje,
- zkontrolovat stav čalounění, zda nevykazuje známky poškození,
- zkontrolovat funkčnost brzdy,
- zkontrolovat správnou funkci spon,
- vždy používejte bezpečnostní pásy; suché zipy na těchto pásech se musí překrývat minimálně o 8 cm,
- přizpůsobit výrobek rozměrům a potřebám uživatele správným nastavením nastavitelných částí výrobku,
- ujistit se, zda jsou pohyblivé části a nastavovací knoflíky výrobku pevně uchyceny a zajištěny,
- zajistit bezpečnost uživatele pomocí dostupných stabilizačních prvků výbavy výrobku. Cílem je chránit uživatele mimo jiné před vypadnutím nebo vysunutím ze zařízení,
- V případě, že u uživatele dochází k nadměrnému napětí v oblasti adduktorů dolních končetin, doporučuje se používat vybrané pásy na odvedení stehen, aby se předešlo vzniku otlaků a/nebo proleženin v oblasti kolenních kloubů na mediální straně.

2. Je zakázáno používat výrobek způsobem, k němuž není určen.

3. Je zakázáno výrobek používat, pokud je poškozený nebo mu chybí jakákoli součást.

4. Je zakázáno nechat uživatele v zařízení bez doprovodu a dohledu dospělé osoby.

5. Výrobek nepoužívejte, pokud není poblíž osoba, která se seznámila s návodem k použití.

6. Je zakázáno ponechávat výrobek s uživatelem bez dozoru na svažitém nebo nerovném terénu.

7. Bezpečnostní pravidla

7. Je zakázáno s výrobkem jezdit nahoru a dolů po schodech, a to jak s uživatelem, tak bez něj.
8. Nastupování a vystupování uživatele z výrobku by se mělo vždy provádět při zapnutých brzdách.
9. Je třeba dbát na to, aby uživatel při nastupování a vystupování z výrobku nestál na opěrce pro nohy.
10. Je třeba dbát na to, aby se během používání výrobku končetiny uživatele nedostaly mezi nastavitelné části zařízení.
11. Výrobek je třeba skladovat a používat mimo dosah zdrojů ohně nebo vysokých teplot. Výrobek by rovněž neměl být skladován v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, ve sklepech, venku – na balkonech nebo terasách. V případě, že je to nezbytné a výrobek bude delší dobu skladován mimo prostory s nízkou vlhkostí vzduchu, je třeba jej chránit nepromokavým obalem.
12. Při přepravě výrobku bez uživatele je třeba jej řádně zabezpečit před případným poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného zabezpečení výrobku během přepravy.
13. Před použitím výrobku je třeba odstranit veškeré papírové a fóliové obaly.

POZOR

Nesprávné nastavení výrobku může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, deformace těla, přetížení kloubů atd. V případě jejich výskytu je třeba okamžitě přerušit používání výrobku, uživatele z přístroje vyjmout a uložit do lehu. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, je třeba neprodleně kontaktovat lékaře nebo fyzioterapeuta. Pokud příznaky ustoupily, je třeba o tom informovat ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta, aby bylo možné rozhodnout o dalším průběhu rehabilitace.

Závažnou událost související s výrobkem je třeba nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel trvalé bydliště.

Je zakázáno přepravovat uživatele v tomto výrobku ve dopravních prostředcích (např. ve vlaku, autě, autobusu).

Výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí spolknutí uživatelem.

Výrobek, který vykazuje jakékoli známky poškození, zničení nebo opotřebení, se nesmí používat. Pouze plně funkční výrobek, používaný v souladu s návodem k použití, je pro uživatele bezpečný. V případě poškození výrobku je nutné jeho používání ukončit a kontaktovat výrobce.

7. Zasady bezpieczeństwa

POZOR

Nepokoušejte se výrobek opravovat sami ani provádět jakékoli změny v jeho konstrukci, protože to vystavuje uživatele nebezpečí a vede ke ztrátě záruky na výrobek.

Nepřekračujte maximální přípustnou hmotnost uživatele uvedenou na typovém štítku a v tabulce velikostí, která je k dispozici v návodu k použití a na webových stránkách.



8. Záruční podmínky

1. Společnost Akces-MED Sp. z o.o. prodává výrobky, které jsou technicky funkční a neobsahují konstrukční, montážní ani materiálové vady atd.
2. Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka, počítaná ode dne zakoupení výrobku uživatelem. Během této doby výrobce garantuje opravy v rámci bezplatného servisu v souladu se záručním listem.
3. Poškození vzniklá po uplynutí 24 měsíců mohou být odstraněna na náklady uživatele.
4. Výrobce stanovuje dobu životnosti výrobku na 48 měsíců. Po uplynutí této doby může uživatel výrobek používat pouze za podmínky, že jej zašle výrobci k provedení kontroly. Po provedení kontroly výrobce znovu stanoví dobu životnosti výrobku a datum další kontroly.
5. V případě poškození výrobku se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na oddělení zákaznického servisu společnosti Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).

9. Údržba a čištění

Speciální invalidní vozík ULISES EVO PRO™, který je zdravotnickým prostředkem, by měl být udržován v náležitě čistotě a používán v souladu s doporučeními výrobce.

Zařízení je třeba skladovat v čisté, suché a větrané místnosti.

Údržba a čištění musí být prováděny nejméně jednou za měsíc. Pravidelné čištění a údržba výrobku jsou nezbytné pro zachování jeho správné funkce a bezpečnosti.

Doporučení pro čištění čalounění a jednotlivých částí výrobku.

1. Očistěte vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku namočeného v jemném, běžně dostupném čisticím prostředku.
2. Použití příliš mokrého hadříku může způsobit zvětšení skvrn, poškození čalounění nebo pěny uvnitř.
3. Po odstranění skvrn je třeba čalounění otřít čistým, vlhkým hadříkem a poté osušit.
4. Při čištění se nesmí čalounění namočit.
5. Čalounění nesmí být namočené.
6. Nezapomeňte před dalším čištěním odstranit přebytečnou vlhkost z čalounění.
7. Nedoporučuje se používat tvrdé kartáče.
8. Čalounění se nesmí čistit silnými chemickými prostředky, např. rozpouštědly nebo žíravými prostředky na bázi chlóru.
9. Během používání výrobku uživatelem není povoleno výrobek čistit, vyměňovat jeho součásti ani provádět jeho údržbu.
10. Kovové a plastové součásti je třeba čistit ručně pomocí běžně dostupných čisticích prostředků na plasty, a to po předchozím seznámení se s bezpečnostními pokyny výrobce daného čisticího prostředku.
11. Kovové, plastové, dřevěné a čalouněné části výrobku lze dezinfikovat běžně dostupným dezinfekčním prostředkem. Chcete-li vybranou část dezinfikovat, nastříkejte na její povrch běžně dostupný dezinfekční prostředek a otřete ji suchým, čistým hadříkem. Po dezinfekci je třeba počkat, až prvek zcela vyschne, zejména v případe čalounění. Při výběru dezinfekčního prostředku na bázi alkoholu je třeba nejprve na nenápadném místě zkontrolovat, zda přípravek nezpůsobí odbarvení nebo poškození dezinfikovaného povrchu.



9. Údržba a čištění

Před zahájením používání je třeba:

- očistit kola od veškerých nečistot,
- zkontrolovat, zda jsou kola správně utažená, zda nejsou poškozená a zda brzda neblokuje otáčení kol,
- zkontrolovat, zda konstrukce výrobku nevykazuje známky prasklin nebo jiných deformací,
- zkontrolovat, zda se všechny pohyblivé části pohybují v plném rozsahu a zda jsou všechny šrouby, matice, knoflíky atd. kompletní a řádně utažené,
- zkontrolujte, zda nejsou popruhy roztřepené a zda spony, suché zipy a přezky fungují správně.

POZOR

Před dalším použitím výrobku musí být čalounění vždy suché!

Za škody vzniklé v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků nenese výrobce Akces-MED Sp. z o.o. žádnou odpovědnost.

Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo technické závady vzniklé při správném používání výrobku. Pouze v případě přesného dodržování těchto pokynů nese odpovědnost za správnou funkčnost výrobku výrobce.

V případě jakéhokoli poškození se obraťte na autorizovaného prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na oddělení zákaznického servisu společnosti Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).

9. Údržba a čištění

TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Technické prohlídky je třeba provádět pravidelně. Před zahájením servisních prací je třeba výrobek důkladně vyčistit, aby se odhalila případná skrytá poškození.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

CELKOVÝ STAV VÝROBKU

Zkontrolovat:

- celý výrobek z hlediska jakýchkoli viditelných poškození, prasklin a mechanických vad,
- je výrobek kompletní,
- jsou všechny šrouby, vruty, knoflíky, matice a další konstrukční prvky výrobku kompletní a utažené.

KOLA A BRZDY

Zkontrolovat:

- při zvednutí podvozku zkontrolujte, zda jsou kola správně upevněna a nejsou poškozená (pokud se to týká),
- zda brzdy zablokujej rotující kola (pokud se to týká),
- zkontrolujte, zda nejsou kola znečištěná. Odstraňte z kol veškeré nečistoty.

UPEVNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Zkontrolujte všechny mechanismy vozíku a jeho pohyblivé části, zejména zkontrolujte:

- správnost montáže sedadla (pokud se to týká),
- správnost montáže kol (pokud se to týká),
- správnost montáže a fungování bezpečnostních prvků chránících uživatele (pokud se to týká),
- jsou všechny pohyblivé části kompletní, pohybují se v plném rozsahu, nezadrhávají se,
- správná funkce regulačních mechanismů (pokud jsou k dispozici) u následujících prvků: opěrka hlavy, opěradlo, sedák, mezikolení klín, loketní opěrky, podnožka.

ČALOUNĚNÉ PRVKY

Zkontrolovat:

- čalouněné části z hlediska případných poškození, natržení, prasklin, uvolněných švů, deformací,
- zda nejsou stabilizační pásy uživatele, vesty a bezpečnostní pásy roztřepené nebo zkroucené a zda spony a přezky fungují správně,
- Jsou stabilizační pásy uživatele, vesty a bezpečnostní pásy správně nasazeny a nerozepínají se při tlaku či tahu?

V případě zjištění jakéhokoli poškození nebo nedostatku je třeba přestat výrobek používat a obrátit se na prodejce/distributora, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na výrobce.

JEDNOU TÝDNĚ

ČIŠTĚNÍ VÝROBKU

Konstrukci a čalounění výrobku otřete od nečistot vzniklých při každodenním používání (prach, bláto či jiné nečistoty) pomocí vlhkého hadříku s přísadou jemného, běžně dostupného čisticího prostředku. Odstraňte nečistoty (např. vlasy, zbytky jídla atd.) z pohyblivých částí výrobku.

Výrobek je třeba čistit vždy, když je to nutné, nejméně však jednou týdně. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi chlóru nebo methyalkoholu. Před zahájením používání výrobku musí být čalounění suché.

9. Údržba a čištění

JEDNOU ZA MĚSÍC

NÁPRAVY, RYCHLOUZÁVĚRY (POKUD SE TO TÝKÁ)

Zkontrolovat:

- zda se kola volně otáčejí na nápravách a zda na nápravách není vůle. Údržba spočívá v nanesení malého množství konzervačního maziva mezi nápravu a náboj kola. Zkontrolujte nasazování a sundávání kola.

Pokud zjistíte znečištění, očistěte kolečka od zbytků jídla, prachu, vlasů a podobně.

SPOJE KONSTRUKCE VÝROBKU (SVÁŘENÉ, ZÁVITOVÉ, PÁJENÉ)

Zkontrolovat:

- stav konstrukce výrobku v místech spojů (svařované spoje, závity, pájené spoje).

PNEUMATIKY, DUŠE (POKUD SE TO TÝKÁ)

Zkontrolovat:

- stav opotřebení běhounu. Zkontrolujte, zda nejsou patrná poškození. Zkontrolujte tlak v pneumatikách (pokud se to týká).

Pokud zjistíte, že je tlak v pneumatikách příliš nízký, je třeba je dofouknout na správnou hodnotu.

V případě zjištění jakéhokoli poškození nebo nedostatku je třeba přestat výrobek používat a obrátit se na prodejce/distributora, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na výrobce.

JEDNOU ZA 6 MĚSÍCŮ

POHYBLIVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE

Zkontrolovat:

- kontrolovat pohyblivé části konstrukce z hlediska případného poškození a provádět jejich údržbu pomocí určeného přípravku.

OZNAČENÍ

Zkontrolovat:

- označení a etiketu výrobku z hlediska jejich čitelnosti.

V případě zjištění jakéhokoli poškození nebo nedostatku je třeba přestat výrobek používat a obrátit se na prodejce/distributora, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na výrobce.

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU

PODROBNÝ PŘEHLED VÝROBKU

Výrobce stanoví dobu životnosti výrobku, která je uvedena v návodu k použití. Po uplynutí této doby může uživatel výrobek používat pouze za podmínky, že jej zašle výrobcí k provedení prohlídky.

Po provedení prohlídky výrobce znovu stanoví dobu životnosti vozíku a datum další prohlídky.

V případě dotazů se obraťte na prodejce/distributora, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na výrobce.

10. Značení

	Osvědčení o shodě výrobku se základními požadavky předpisů EU		Sušit ve svislé poloze
	Sériové číslo		Nechlorovat
	Před použitím si přečtěte návod k použití		Nežehlit
	Pozor!		Nečistit chemicky
	Výrobce		Nebělit
	Datum výroby		Pozor, křehký obsah
	Výrobek neobsahuje latex		Zákaz sjíždění po schodech, ať už s osobou, nebo bez ní
	Skladujte na suchém místě		Zákaz ponechání uživatele bez dozoru během používání výrobku
	Chraňte před slunečním zářením		Zákaz používání výrobku bez zapnutých bezpečnostních pásů
	Omezení skladovací teploty		Seznamte se s dalšími informacemi
	Zdravotnický prostředek		Stiskněte tlačítko vyznačené na fotografii
	Jedinečný identifikační kód výrobku		K montáži je nutné použít nářadí uvedené v návodu

Na typovém štítku výrobku jsou uvedeny základní informace o výrobku, jako je název, maximální zatížení, údaje o výrobcí, datum výroby a označení v souladu s požadavky na zdravotnické prostředky.



**European
Funds**
Smart Growth



**Republic
of Poland**

European Union
European Regional
Development Fund



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B,
36-002 Jasionka, POLAND
ph. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619

Autorizovaný zástupce